
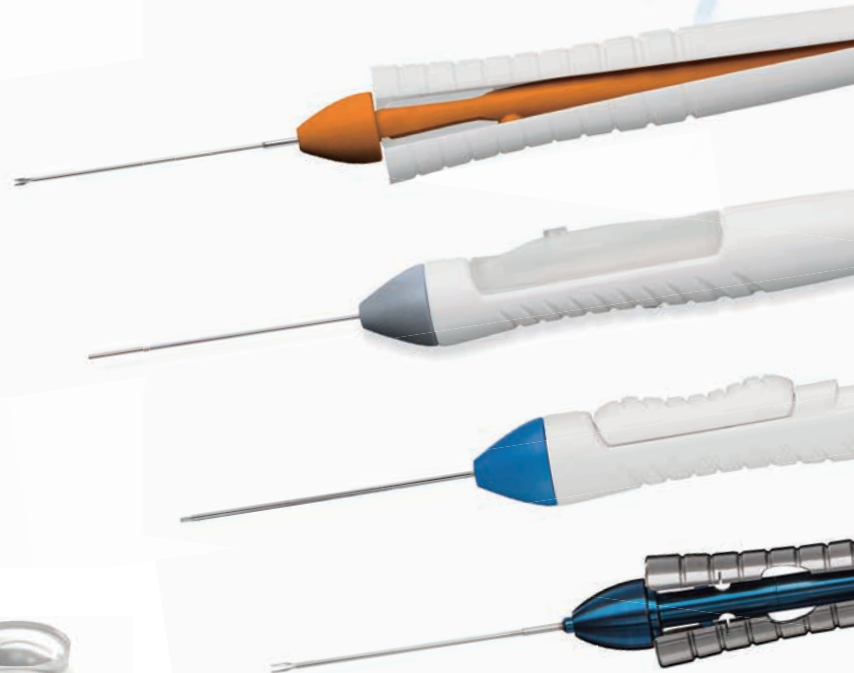


BVI

VitreQ[®] Vitreoretinal Instruments

- シングルユース フォーセップ・シザーズ・バックフラッシュ
- スクイザー
- ティッシュマニピュレータ
- 硝子体レンズ
- シャンデリア
- リューザブルインストルメンツ

BVIのブランドVitreQは
硝子体手術のニーズに応え、高品質な製品を提供します

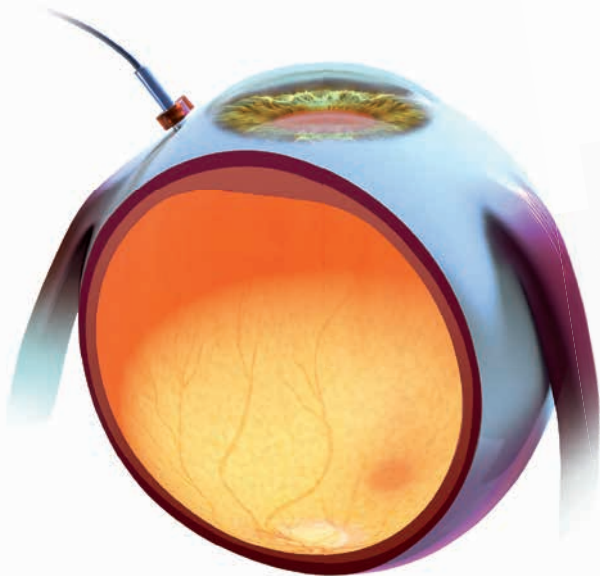

BVIのブランドVitreQ®

網膜硝子体手術にフォーカスした製品を製造しています。
私たちは高品質な製品を供給することで、
患者様の健康の一助となることをゴールにしています。



CONTENTS

シングルユース

| | |
|-----------------------------------|----|
| フォーセップ(鉗子) | 01 |
| シザーズ(剪刀) | |
| バックフラッシュ | |
| スクイザー | 02 |
| マニピュレーター | |
| 硝子体レンズ | 03 |
| 29G スポットライト ディレクショナル シャンデリア | 04 |

リユーズブル

| | |
|------------------|----|
| フォーセップ(鉗子) | 05 |
| シザーズ(剪刀) | |

color-coded

ISOに基づいたカラーコードで
サイズごとに色分けしています。

| | |
|------|-------|
| イエロー | 20ゲージ |
| ブルー | 23ゲージ |
| オレンジ | 25ゲージ |
| グレー | 27ゲージ |

VitreQ® Single-Use Forceps, Scissors, Backflush

シングルユース フォーセップ(鉗子)、シザーズ(剪刀)、バックフラッシュ

特徴

Ergonomically designed handle

- 人間工学に基づいたハンドルデザイン
- 先端チップの開閉がハンドルとリンクしているので 繊細な把持や切断が容易です

Rigid shaft

- 新素材を用いた硬いシャフト
- 先端を含めたシャフトの全長は32mm以上

Single-use

- 感染対策
- 修理不要(洗浄、滅菌が不要)
- リューザブルのバックアップ

Wide range of sizes

- ゲージごとに豊富なアイテム



5本/箱(滅菌済み)

シングルユース フォーセップ(鉗子)

| | 製品名 | カタログ番号 | | |
|--|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 23G | 25G | 27G |
| | セレイテッド鉗子 | FC23. D02 | FC25. D02 | |
| | ILMエンドグリップ鉗子 | FC23. D03 | FC25. D03 | FC27. D03 |
| | エイシメントリカル エンドグリップ鉗子 | FC23. D04 | FC25. D04 | |


| | 製品名 | カタログ番号 | | |
|--|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 23G | 25G | 27G |
| | エッカード氏 ILM鉗子(エンドグリップ) | FC23. D05 | FC25. D05 | FC27. D05 |
| | クーン氏 パワー鉗子 45° | FC23. D06 | FC25. D06 | |
| | シャー氏 X-traグリップ鉗子 45° | FC23. D07 | FC25. D07 | FC27. D07 |

販売名: Vitreq ディスポーザブル フォーセップス
 認証番号: 229AFBZI00012000

シングルユース シザーズ(剪刀)

| | 製品名 | カタログ番号 | | |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 23G | 25G | 27G |
| | マイクロ垂直剪刀 | SC23. D01 | SC25. D01 | SC27. D01 |
| | マイクロ水平剪刀 直 | SC23. D02 | SC25. D02 | |
| | マイクロ水平剪刀 曲 | SC23. D03 | SC25. D03 | SC27. D03 |

販売名: Vitreq ディスポーザブル シザーズ
 認証番号: 229AFBZI00011000

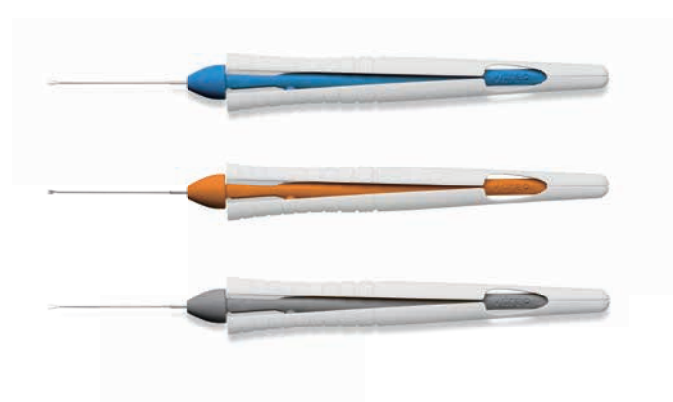

シングルユース バックフラッシュ

| | 製品名 | カタログ番号 | | |
|--|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 23G | 25G | 27G |
| | バックフラッシュ アスピレーションチュービング付き | BF23. D01 | BF25. D01 | BF27. D01 |
| | バックフラッシュ ブラッシュ アスピレーションチュービング付き | BF23. D02 | BF25. D02 | BF27. D02 |
| | バックフラッシュ ブラッシュ 先端収納型 アスピレーションチュービング付 | BF23. D05 | BF25. D05 | |

| | 製品名 | カタログ番号 | | |
|--|-------------------------------|-----------|-----------|-----|
| | | 23G | 25G | 27G |
| | バックフラッシュ 伸縮型 アスピレーションチュービング付き | BF23. D07 | BF25. D07 | |

販売名: Vitreq ディスポーザブル バックフラッシュ
 認証番号: 229AFBZI00010000



VitreQ® Squeezer

シングルユース スクイザー

Dr.エッカードとVitreQ社で共同開発した製品です。

特徴

- 眼科手術用補助剤（染色剤やPFC）の注入スピードや注入量などのコントロールが容易です
- ペンシルグリップは微細なコントロールをサポートします



Dr.エッカード

ダイスクイザー

SQ00.D01



PFC スクイザー

SQ00.D02



| カタログ番号 | 製品名 | 規格 | 入数/箱 |
|----------|----------------|-----|------|
| SQ00.D01 | ダイスクイザー (染色剤用) | 2ml | 5本* |
| SQ00.D02 | PFCスクイザー | 5ml | 5本* |

※ニードル部分は含まれません

販売名: エッカード氏 Squeezer
届出番号: 13B1X10112VTQ004

VitreQ® Manipulator

シングルユース マニピュレーター


特徴

● 操作性に優れた独自のデザイン

- ー 先端のノッチ付きシリコンチップは、網膜を傷つけずにブラッシングできます
- ー チップはシャフト部分に格納でき、スムーズに患部へアクセスできます
- ー チップは視認性のよい緑色で、網膜との識別が容易です

● ダイヤモンド粒子不使用

- ー 先端チップにダイヤモンド粒子を使用していないため、眼内への粒子残存を防ぎます

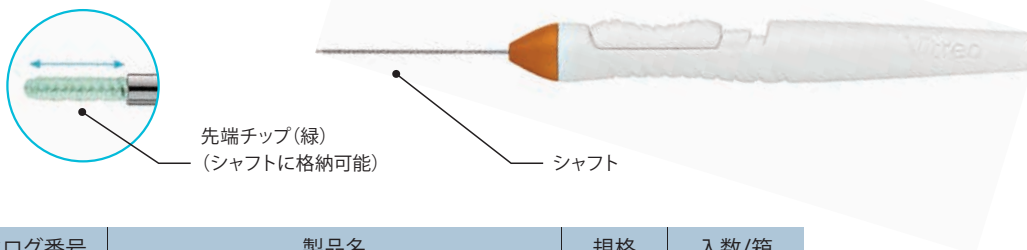

| カタログ番号 | 製品名 | 規格 | 入数/箱 |
|----------|------------------------|-----|------|
| TM23.D01 | リトラクタブル ティッシュ マニピュレーター | 23G | 5本 |
| TM25.D01 | リトラクタブル ティッシュ マニピュレーター | 25G | 5本 |

販売名: Vitreq ディスポーザブル リトラクタブルマニピュレーター
認証番号: 231AFBZX00001000

VitreQ® Vitrectomy Lenses

シングルユース 硝子体レンズ

VitreQ®の硝子体レンズは透明度が高く、クリアな視界を提供して術者をサポートします。

特徴

● レンズ素材

- － アクリル樹脂 (PMMA) のハイインデックスレンズ
- － 透明度が高く高解像度の視野を確保します


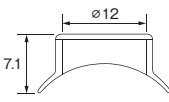













● ラインアップ

- － レンズは5タイプで、後眼部をはっきりと観察できます
- － 有水晶体眼と偽水晶体眼の双方にお使いいただけます

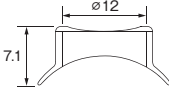● シリコンリング

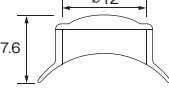- － やわらかい4つのフリンジで、しっかりと眼表面に固定できます
- － カニューラロックにより、複雑な手技中も操作性に優れています
- － リングの縫合やその他補助器材は不要です

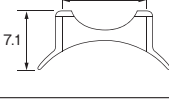
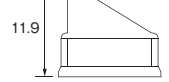
| カタログ番号 | 名称 | 入数/箱 | 外観 | 形状 | 視野 | 倍率・製品説明 |
|----------|--------------------|------|---|--|---|----------------------|
| VL00.D01 | 硝子体レンズ フラット | 5個 |  |  |  | 1.0× 後極部観察用 |
| VL00.D02 | 硝子体レンズ バイコンケーブ | 5個 |  |  |  | 0.8× 空気置換後 後極部観察用 |
| VL00.D03 | 硝子体レンズ マグニファイング | 5個 |  |  |  | 1.4× 後極部拡大観察用 |
| VL00.D04 | 硝子体レンズ ワイドフィールド | 5個 |  |  |  | 0.5× 後極部広範囲観察用 |
| VL00.D05 | 硝子体レンズ 30° プリズム | 5個 |  |  |  | 1.0× 周辺視野観察用 |



VitreQ® 29G Spotlight Directional Chandelier

29G スポットライト ディレクショナル シャンデリア

スポットライトディレクショナルシャンデリアは、
 双手法の網膜硝子体手術用に開発されました。

仕様と特徴

- ファイバーチップのデザインは広角で
 十分な明るさを確保できます
- 一体型の強膜マーカー付き
- 付属のボールジョイントクリップにより、
 術中の光の照射方向をコントロールでき
 網膜周辺部を観察できます
- バルブ付き29Gエントリシステムは低侵襲で、
 挿入と固定が簡単です

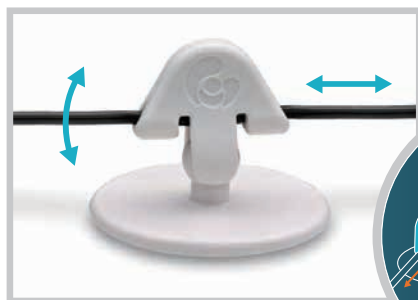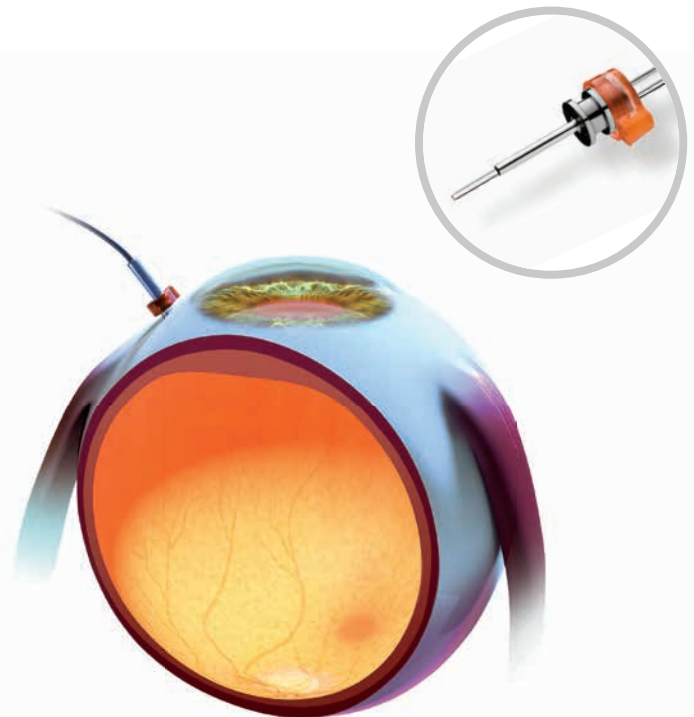

ボールジョイントクリップによる
位置コントロール



強膜マーカー



バルブ付きエントリシステム



29G シャンデリア

| 製品名 | カタログ番号 | 入数/箱 |
|--------------------------------|----------|------|
| 29G スポットライト ディレクショナル シャンデリア | LF29.D02 | 5本 |

販売名: Vitreq 29G スポットライトディレクショナルシャンデリア
 認証番号: 302AIBZX00007000

ライトソースアダプター ※全て単品

| 製品名 | カタログ番号 |
|-----------------------------|----------|
| Constellation® 用ライトソースアダプター | LF00.R01 |
| Stellaris® 用ライトソースアダプター | LF00.R02 |
| Geuder® 用ライトソースアダプター | LF00.R03 |
| DORC® 用ライトソースアダプター | LF00.R05 |

販売名: Vitreq ライトソース アダプター
 届出番号: 13B1X10112VTQ005

VitreQ® Reusable Forceps, Scissors

リユーズابل フォーセップ(鉗子)、シザーズ(剪刀)

再使用可能なフォーセップ、シザーズです。



特徴

Ergonomically designed handle

- 人間工学に基づいたハンドルデザイン
- 先端チップの開閉がハンドルとリンクしているので、繊細な把持や切断が容易です
- ハンドルはチタン製

Rigid shaft

- 新素材を用いた硬いシャフト
- 先端を含めたシャフトの全長は32mm以上

Wide range of sizes

- ゲージごとに豊富なアイテム

※全て単品

メンテナンスについて

別売のクリーニングアダプタを用いて洗浄・滅菌ができます。洗浄アダプタと滅菌用ホルダが一体化されたデザインで、繊細な先端チップを洗浄や滅菌から保護します。

修理につきましては、営業員にご相談ください。

クリーニングアダプター
製品番号: FC00.R03



リユーズابل フォーセップ(鉗子)

| | 製品名 | カタログ番号 | | |
|--|--------------------|----------|----------|-----|
| | | 23G | 25G | 27G |
| | セレイテッド鉗子 | FC23.R02 | FC25.R02 | |
| | ILMエンドグリップ鉗子 | FC23.R03 | FC25.R03 | |
| | エイシメントリカルエンドグリップ鉗子 | FC23.R04 | FC25.R04 | |

| | 製品名 | カタログ番号 | | |
|--|-----------------------|----------|----------|----------|
| | | 23G | 25G | 27G |
| | エッカード氏 ILM鉗子(エンドグリップ) | FC23.R05 | FC25.R05 | FC27.R05 |
| | クーン氏 パワー鉗子 45° | FC23.R06 | FC25.R06 | |
| | シャー氏 X-traグリップ鉗子 45° | FC23.R07 | FC25.R07 | FC27.R07 |

販売名: Vitreq 硝子体手術用鉗子
届出番号: 13B1X10112VTQ001

リユーズابل シザーズ(剪刀)

| | 製品名 | カタログ番号 | | |
|--|------------|----------|----------|----------|
| | | 23G | 25G | 27G |
| | マイクロ垂直剪刀 | SC23.R01 | SC25.R01 | |
| | マイクロ水平剪刀 直 | SC23.R02 | SC25.R02 | |
| | マイクロ水平剪刀 曲 | SC23.R03 | SC25.R03 | SC27.R03 |

販売名: Vitreq 硝子体手術用剪刀
届出番号: 13B1X10112VTQ003



BVI

製造販売元

ビーバービジテックインターナショナルジャパン株式会社

〒102-0083 東京都千代田区麹町2-8 MLC麹町ビル3階

www.bvimedical.com/jp

受注センター Tel. 03-5214-2337 Fax. 03-5214-2417

メール：ContactUs@bvimedical.com